




מדריך למשתמש

67	אודות TriPollar® POSE™
67	טכנולוגיית TriPollar® POSE™
66	הוראות בטיחות
65	תכולת הערכה
65	גל הכנה TriPollar®
64	תדירות הטיפול
64	הכנה לטיפול
63	הלך הטיפול
61	תוצאות צפויות
61	טיפול ותחזוקה
60	איתור תקלות
60	מפרט טכני
60	תמיכה טכנית



אודות TriPollar® טכנולוגיית TriPollar® **אודות TriPollar® POSE™**

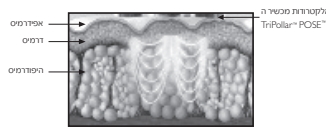

אלקטרודת מסירה ה-TriPollar® POSE™

- תוצאות TriPollar® מסבסס על העברת אנרגיה ממוקדת בתדר גבוה המממט את שכבת השומן והדרמיס.
- תוצאות המיוחד של מסירה ה-TriPollar® מאפשר העברת אנרגיה בתדר גבוה לשיבת העור הרצויה (דרמיס והיפרדרמיס/ שומן) על ידי 4 אלקטרודות, בזמן לטיפול אחד בחדשה.
- תחומה בהולך הטיפול על פני העור, היא נעימה וחמימה, כמעט שבמקביל מתחילה הפעילות הקלינית בשכבות הפנימיות של העור.
- החימום מאיץ תהליך טבעי של הפרשת הנוזל השומני מתוך התאים, התהליך שגורם לתאי השומן להתכווץ בגודלם. במקביל, החימום הממוקד בשכבת הדרמיס, מזרז ומגביר את הפעילות המטבולית של תאי הקולגן ומאפשר ייצור סיבי קולגן חדשים נוספים תוך הגמשת וחזוק סיבי הקולגן הקיימים. התוצאה – תוצרת היקפים ועור מרוקן יותר מפיאה הצליליט מופחת.
- לקבלת תוצאות מידיות ואיכות טובה, יש להמשיך בטיפול של 20 דקות לערך לאורך 2-3 פעמים בשבוע, במשך 6-8 שבועות.

TriPollar® POSE™ הינו מכשיר בטוח ואפקטיבי לשימוש.

ברבות על רכישת TriPollar® POSE™ – מכשיר קלני מהכני לנף, הממקד את העור ומצר היקפים. עשוי, לראשונה, גם אתם יכולים ליהנות ממכשיר בטוח, יעיל וקל לשימוש. TriPollar® POSE™ מביא אליכם הביתה איכות ותוצאות דומות לאלו המושגות במרפאות המקצועיות.

TriPollar® POSE™ הוא המכשיר הביתי היחיד שיעילותו הקלינית מוכחת מדעית. ובתגובה יוצר סיבי הקולגן כך שיעורן הופך ממוקד יותר, היקפים צרים יותר וגוראות הצליליט פוחתות.

TriPollar® POSE™ מסבסס על TriPollar®, טכנולוגיית RF פורצת דרך. באמצעות 4 אלקטרודות עוברת אנרגיה ממוקדת לתוך שכבות הדרמיס והשומן (היפרדרמיס) ומממט אתן החימום מעורר את תאי השומן לשחרור את נוזל השומן האגור בתוכם באופן מואץ וכן נוצרת התמטות תאי השומן וידיה בוקפים. במקביל, גורם החימום לזמן סיבי הקולגן הקיימים בשכבת הדרמיס ומגביר את הפעילות המטבולית האורגנית ליצור סיבי קולגן חדשים נוספים, כך שסיבי הקולגן התומכים בשכבת העור העליונה ואחראים למראה צעיר ורענן של העור, מתרבים ומתחזקים. תוצאות הטיפול נראות לעין ומורגשות מיד בתום הטיפול הראשון ולאורך זמן, ושומרות על עור מוצק, נמיש ורך יותר, ועף אסוף ומחוטב יותר.



הוראות בטיחות

- חשוב: חובה לקרוא את המודרן למשתמש לפני השימוש הראשון ולקבוע בקפדנות אחר הוראות הבטיחות. לתשומת לבכם – בדומה לכל מכשיר חשמלי עליכם להשתמש בו בהירות בכדי להבטיח את ביטוחכם.
- ⚠ אזהרה!**
- זוהו מכשיר חשמלי! על מנת להפחית את הסיכון מקבלת שוק חשמלי קטלני:
 - אין לגעת במכשיר במידה ונפל למים. יש להציא מהתקע בידים יבשות.
 - אין לאחסן את המכשיר ליד מקור מים כגון כיר או אמבטיה
 - מיד לאחר סיום השימוש או לפני ניקוי המכשיר יש לכבות את המכשיר ולתקן את ספק הכוח מן החשמל.
- ⚠ אזהרה!**
- יש להשתמש במכשיר אך ורק לפי יעודו המקורי ועל פי הוראות השימוש המפורטות במודרן למשתמש.
 - כאשר המכשיר מחובר לחשמל והולק, אין להשאירו ללא השגחה ואין לגעת באלקטרוניות.
 - אין להשתמש במכשיר אם הוא ממוקד.
 - אין להשתמש במכשיר אם הכבל החשמלי פגום.
 - יש להשתמש במכשיר אך ורק בצירוף הכבל והספק המקוריים.
 - גל ההכנה לטיפול - TriPollar® Preparation Gel - הינו לשימוש חיצוני בלבד.
 - יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
 - אין לגעת במכשיר אלא בידים יבשות לחלוטין.
 - יש למרוח את גל ההכנה לטיפול - TriPollar® Preparation Gel - על עור נקי ויבש בלבד.
- חשוב: אין להשתמש במכשיר באיורים הבאים: פנים, צוואר, חזה, מפשעה, איברי הרבייה או בתי השחי.
- אין להשתמש ב "TriPollar® POSE" במידה ואודו או יותר מהמסופים הבאים תקף לגביכם:
- באם הינכם מתחת לגיל 18.
 - באם הינכם בעלי קוצב לב או דפיקולטור.
 - באם קיימים שתי מתכת באיזור הטיפול.
 - באם הינכם בעלי היסטוריה של סרטן, במיוחד סרטן העור או שמת סרום סרטני.
 - באם הינכם בעלי גבינה רפואית חמורה כגון או סדרים בתקופת הלב.
 - באם הנכם בהריון או מניקות.
 - באם הנכם חולים במחלות אוטואימוניות כגון איידס או נוטלים תרופות לדיכוי המערכת החיסונית.
 - באם הנכם חולים במחלות חום כלשהם כגון הרפס סימפלקס (באיזור הטיפול).
 - באם הנכם סובלים ממחלת עור באיזור הטיפול, כגון פצעים, דלקות, פסוריאזיס, אקזמות, פיריות למיניהן וכו'.
 - באם הנכם בעלי היסטוריה של עור מנוקע או עור גריש במיוחד.
 - באם עברתם ניתוח או טיפול ליד או קולף כפי באיזור הטיפול בשלושת החודשים האחרונים (או עדין בשלב החלמה מטיפול שבו).
 - באם יש לכם חומרי מילוי קבועים באיזור הטיפול.
 - באם יש לכם מילוי זמני באיזור הטיפול, אגב תתייעצו עם הרופא שלכם לפני השימוש ב "TriPollar® POSE".
 - באם הינכם סובלים תרופות סטנדרטיות או המאופסיות או תוספי תזונה, או טיפול בטיפולים או כל חומר אחר היעיל לנרמם לעור גריש או יבש.
- לתשומת לבכם, גל מקרה של חום ודואה או התלככות לגבי גישות כאלו אחרות, מומלץ להיעזר עם הרופא לפני השימוש ב "TriPollar® STOP".
- ⚠ אזהרה!**
- שימוש במכשיר שלא על פי הוראות הפעולה המפורטות במודרן זה, עלול לגרום נזק לעורכם, כולל כונית.

תכולת הערכה

TriPollar® preparation gel

הטווח הממוצע של גל ההכנה TriPollar® Preparation Gel מיועד להכנת האזור מטופל לאגירת ה TriPollar® ומבטיחה תוצאות טיפול אסתטיות, תן שמירה על שכבת העור החיצונית (האפידרמיס)


אזהרה
שימוש במכשיר ללא גל ההכנה TriPollar® Preparation Gel או שימוש בתחליף, עלול לפגוע בבטיחותכם ובאכזבת התוצאות. יש להשתמש בגל ההכנה על פי ההוראות.

- כיצד להשתמש בגל ההכנה (איור 4):
1. גל ההכנה - TriPollar® Preparation Gel תקף לשימוש עד 12 חודשים מרגע פתיחת השפופרת.
 2. בעזרת המרית המצורפת, מרוח שכבה דקה של גל ההכנה על עור נקי ויבש.
 3. אין להסיר את הגל עד לסיים הטיפול.
 3. יתכן וצל ההכנה יעקין תחושת תמימות קלה על פני העור.

חשוב: יש לבצע בדיקת רגישות 24 שעות לפני הטיפול הראשון בכדי לוודא כי לא קיימת רגישות לגל ההכנה או לפעילות המכשיר. מרוח כמות קטנה של גל ההכנה TriPollar® Preparation Gel במקום נסתר כגון בחלק הפנימי של הווריד, וטפלו עם מכשיר "TriPollar® POSE" עד שנותר החיווי הכתומה נדלקת. במידה ולא נצפתה כזו תגובה שלילית, ניתן להשתמש במכשיר ובגל ההכנה בבטיחה.

רכבת "TriPollar® POSE" כוללת:


1. מכשיר "TriPollar® POSE" (איור 1)
2. ספק כוח "TriPollar® POSE" (איור 2)
3. מתאם שקע "TriPollar® POSE" (איור 3)
4. גל ההכנה TriPollar® Preparation Gel (איור 4)
5. מודרן למשתמש וסרט הדרכה (איור 5)
6. מודרן מהיר למשתמש (איור 5)
7. תעודת אחריות (איור 5)

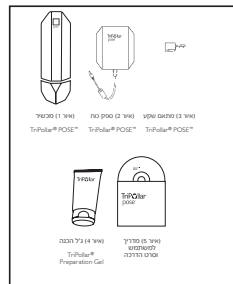



תדירות הטיפול הכנה לטיפול

1. לתוצאות מקסימליות וארוכות טווח, מומלץ להשתמש במכשיר באזור הטיפול הנבחר 2-3 פעמים בשבוע, בהפסקה של יום אחד לפחות בין טיפול לטיפול למשך 6-8 שבועות.
2. לשמירה על תוצאות ארוכות טווח יש להמשיך ולהשתמש במכשיר TriPollar® POSE אחת לשבועיים או במידת הצורך.

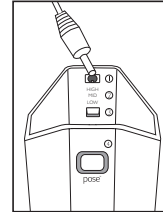

(איור 6)

1. כניסת תקע ספק הכוח
2. גזירת חושי העוצמה - נמוך (LOW) בינוני (MID) גבוה (HIGH)
3. כפתור ההפעלה
4. גזירת החושי הכתומה

- הכנת עימכם לטיפול:**
1. הסרת תכשיטים מאזור הטיפול.
 2. ודא כי איזור הטיפול נקי ויבש משאריות קרם או משחות.
 3. מקמו עצמכם בנוחות, עליכם לשבת בצורה שתאפשר גישה נוחה וחופשית לאיזור הטיפול הנבחרים.
- הכנת את מכשיר TriPollar® POSE לטיפול:**
1. לפני שימוש ראשון במכשיר הסירו את מדבקת האזהרה ממסכה המכשיר. במידה ואין על מסגריכם מדבקה שכזאת, אין להשתמש במכשיר ויש ליצור קשר עם מרכז תמיכה לקבלת עזרה.
 2. חברו את תקע ספק הכוח למכשיר ה- TriPollar® POSE (איור 6).
 3. במידה וזהו שימוש ראשון במכשיר, עליכם להרכיב את מתאם התקע (איור 3) לספק הכוח (איור 2), ולאחר מכן לטקעו. אנו ודא כי המתאם הכנסו כראוי לספק (נשמע צליל "קליק").
 4. הסירו בזריזות את המסכה.



הליך הטיפול

1. מרווח שבבה דקה על לל הכנה TriPollar® Preparation Gel על כל שטח הטיפול.
 2. את הטיפול הראשון מומלץ להתחיל בעוצמת אגרניה נמוכה (LOW). בהמשך תוכלו להתאים את העוצמה על פי תחושתכם. מומלץ להשתמש ברמות אגרניה גבוהות (HIGH) באיזורי גוף בעלי סמט שמון בורה יותר כגון ירכיים וישבן. אזורים בעלי סמט שמון עדינה יותר כגון זרועות וכתף יסופלו לרוב בעוצמות נמוכות (LOW, MID).
- חשוב:** ארבעת האלקטרודות חייבות להיות במגע מלא עם העור בכל עת, במהלך הטיפול לטיפול יעיל, חשוב להקפיד על תנועת סיבובית איטית מאוד ואחידות.
- חשוב:** אם הינם מרגישים חום רב מדי, החלישו את העוצמה.


מטרת הטיפול היא חימום השכבה הפנימית של העור באיזור הטיפול ושמירה על החום למשך זמן מה. טיפול מלא לאזור ייקח במוצע בין 10 ל 20 דקות, תלוי בגודל איזור הטיפול ומשתנה מאדם לאדם.

משך זמן טיפול המלצה*	איזור טיפול עם TriPollar® POSE
20 דקות	בטן (איור 8)
15 דקות	מוותניים (איור 8)
15 דקות	אגן (איור 9)
25 דקות	ישבן (איור 10)
15 דקות	ירכיים (איור 10)
10 דקות	זרועות (איור 11 ו 12)

* לוחות הזמנים המפורטים לעיל הינם ממוצעים אשר נלקחו מניסויים קליניים. הניסויים נעשו על אנשים בעלי מבה גוף ממוצע, ולכן יש להתאים לטבלה זו כאל המלצה בלבד ולקחת בחשבון כי זמן הטיפול יכול להשתנות מאדם לאדם.

לחיצה על כפתור ההפעלה של המכשיר (איור 6) תדליק את גזרת החושי היוקרה על עוצמה נמוכה - LOW. לחיצה נוספת על כפתור ההפעלה תעלה את סמפריורת החימום ברמה נוספת ובתאמה ל- MID - HIGH.

לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה במשך 2-3 שניות תבנה את המכשיר.

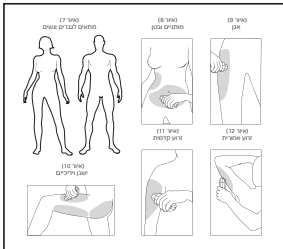



טיפים

- גודל החיוו הכתומה מציינת כי עורכם הגיע למספרטרות החימום האופטימלית. במידה והגודל הכתומה אינה נדלקת לאחר 5 דקות של חימום בשטח המטופל, או אם אינכם מרגישים כלל לחם, נטו להאט כמה שיותר את תנועת הטיפול והסיבוב ממל לעצור על פני העור.
- במידה וגודל החיוו הכתומה נדלקת מיידית, בחרו רמת אנרגיה גבוהה יותר.
- אין צורך ללחוץ את המכשיר על פני העור.
- סיבובים קטנים ואיטיים יעילים יותר מסיבובים גדלים ומהירים. ככל שהסיבובים יהיו איטיים יותר, כך ייתחמם האזור המטופל מהר יותר.
- באם אינכם מרגישים לחם, כשהמכשיר מווסת על עוצמת הטיפול האנרגיה הגבוהה ביותר, נטו להאט כמה שיותר את תנועת הטיפול והסיבוב ממל לעצור על פני העור.
- תושטת העור מנתו הטיפול משתנים סידום לאדם. עליכם להשתמש במכשיר בהתאם להרגשתכם ולנורחכם האישית.

מנגנון בטיחות אוטומטי מונעה
 במכשיר TriPollar® POSE קיים מנגנון יזום חום אוטומטי. כאשר רמת הטמפרטורה בעור עולה מעבר לרמה המוגדרת מראש, יבטל לפעולה מנגנון הבטיחות והמכשיר יפסיק אוטומטית את העברת האנרגיה ופעולת החימום. במצב זה תהבהב הורה היחידקה לסירוגין. הבהוב זה מעיד כי מנגנון הבטיחות פועל. במקרה זה, יש לעבור לשטח טיפול חדש שטרם חומם, והמכשיר יחדש את פעילותו באופן אוטומטי.

3. בחרו באזור הטיפול על-פי העדפתכם: בכוון, מותניים, זרועים, שיקן, אגן או דחיות.
4. חלקו את אזור הטיפול הנבחר לשטח טיפול קטנים בגודל כף היד.
4. חלקו את המכשיר על עורכם, וודאו כי כל 4 האלקטרודות באות בזמנו עם עורכם במהלך כל הטיפול. החלו לזנוע את המכשיר בתנועת סיבוביות, איטיות ורציפות, עד לחימום שטח הטיפול. כאשר העור יגיע למספרטרות האופטימלית, תדלק הורה הכתומה (בדחית המכשיר). המשיכו בטיפול עד מספר שניות ועבו לשטח הטיפול הבא. יש להמשיך כך, כשגובל פעם הבנה עובדים על פני שטח טיפול בגודל כף היד, עד ללכיו מלא של כל אזור הטיפול הנבחר.
5. לתשומת לבכם: במידה וביצעתם את הוראות הטיפול באיטיות מירבית והגורה עדין לא נדלקה, יש לנכות את המכשיר, לנתקו מהתקע ולפנות לתחת שירות.
5. בדועו שהגעתם לרמת החימום / הטמפרטורה הרצויה באזור הטיפול, יש לאתר רמת חום זו למשך זמן מספיק. על מנת להשלים את הטיפול יש להעביר את המכשיר באיטיות ובתנועת גדולות וסיבוביות על פני כל שטח הטיפול בצורה זור תשומה המספרטרות הרצויה באזור. בשלב זה אין צורך להסות שהגורה הכתומה תדלק.

אזהרה!
 יש להקפיד על תנועה המכשיר במהלך הטיפול. השארת המכשיר ללא תנועה באותו האזור עלולה ליצור חימום יתר של העור ואף כוויה.

- סיום הטיפול**
1. לאחר שגיל אזור הטיפול חומם בזמנו השווה, כבו את המכשיר על ידי לחיצה אחת של 2-3 שניות על כפתור הפעולה. לתשומת לבכם, המכשיר יכבה אוטומטית במידה לא השתמשו בו במשך 20 דקות.
 2. ניתן את אזור הטיפול בזמנו מסמן להסרת שאריות של גל ההרנה TriPollar® Preparation Gel



טיפול ותחזוקת המכשיר

תוצאות צפויות

- לפני ניקוי המכשיר יש לודא כי המכשיר כבוי וספק הכוח (אזור 2) הוצא מהשקע.
- מיד לאחר תום הטיפול יש לנקות את המכשיר משאריות גל הכנה TriPollar® Preparation Gel בעזרת נייר טישו רך או מטלית לנה. יש להקפיד על ניקוי יסודי ועדין באזור האלקטרודות וגלאי החום. בשום מקרה אין להרטיב את המכשיר בזמן.
- לאחר סיום הניקוי הריבט, נטו את מכסה הראש.
- TriPollar® POSE הנו מכשיר אישי ולא רצוי לחלוק בו עם אחרים.
- אחטנו את מכשיר TriPollar® POSE במקום קריר ויבש.

החל מהטיפול הראשון ניתן לראות שיפור מידי בגמישות וסקסטיות העור. לאחר סיום מחזור טיפולים מלא, יש לצפות לירידה בהיקפים, שיפור במראה הצלולט והטבה כללית במראה ובתוצרת העור. העור יראה מוחם, רך יותר ויותר יתר.

מטון הרציבות
 הרגישו בהבדל בעוצמתם! מלאו אחר הוראות הטיפול המחזקות ולאחר מכן צבטו בעדינות את אזור הטיפול. מיד לאחר הטיפול הראשון תחלו להרגיש בשיפור בגמישות וסקסטיות העור.

תופעות לוואי אפשריות
 כתוצאה טבעית של תגובת העור לאחר הטיפול, עלולה להופיע על העור אדמומיות ופיחות קלה. תופעות אלו יעלמו זמן קצר לאחר הטיפול וכן אלו המעידות על תחילתו של השינוי אפקט קלוי החל בשכבות הפנימיות של העור. תופעות הלוואי הבאות הינן נדירות. ובמידה והן מופיעות הן בד"כ זמנית ובעולמות לאחר זמן מה. אולם, במידה ותופעות לזוי אלו משככות למעלה מ-24 שעות, יש לפנות לרופא:

- כאבים ממושכים באזור המטופל
- נזק לסקסטיות העור (שלפוחיות, קרם או כוויה)
- עור גרשי למגע
- חבורות
- כאב ראש קל





מפרט טכני	איתור תקלות
------------------	--------------------

משקל: 118 גרם (לא כולל מכסה המכשיר)
תדר: 1MHz
מידות: גובה - 152 מ"מ אורך - 55 מ"מ רוחב - 55 מ"מ (כולל מכסה המכשיר)
תנאי הפעלה: טמפרטורה שבין עד $30^{\circ}\text{C} +$ עד $5^{\circ}\text{C} +$
לחות יחסית: 20%-80%
רייטינג: 50/60Hz 1 A DC 12V 2.5A AC 100Vac to 240Vac
הובלה ואחסון: טמפרטורה שבין 0°C עד 40°C
לחות יחסית: 10%-90%
בטיחות חשמל: ספק החשמל מסוג כדרג 2 - בידוד כפול

מרכז שירות

לקבלת פרטי מרכז המטריקה הקרוב לבייתכם, נא בקרו באתר האינטרנט שלנו: www.stop-age.com.
 נא וודאו כי יש לפלסם את המספר הסידורי של המכשיר המופיע בצד המכשיר. שביעות רצונכם חשובה לנו, נשמח לקבל מכם הערות ודאיות בכל נושא. ניתן לשלוח לנו הודעות דרך האתר או לפי התכתבת הרשומה בגב מודרן זה.

במידה ומכשיר ה- "TriPolla® POSE" אינו פועל, נא בדיקו את אחת מהאפשרויות הבאות:
 1. במידה וכבל ספק החס פגום, יש לפנות למרכז שירות לקוחות להחלפת החלקים.
 2. וודאו כי כבל החשמל מחובר למכשיר ולשקע החשמל.
 3. וודאו כי האור הירוק דולק באחד מהמסבכים (איור 6).
 4. במידה ונורת החיווי הירוקה אטור על המכשיר אינה נדלקת בלחיצה על כפתור הפעלה (איור 6), יש לפנות למרכז שירות לקוחות להחלפת החלקים.
 5. במידה וכפתור הפעלה פגום, אי אפשר להדליק או לכבות את המכשיר / או לא ניתן לזוּסַת את העוצמה (איור 6), יש לפנות למרכז שירות לקוחות להחלפת החלקים.
 6. במידה ונורת החיווי הכתומה נשארת דולקת יותר מדיקה רצוף, ונורת החיווי הירוקה אינה דולקת, יש לפנות למרכז שירות לקוחות.
 7. במידה ונורת החיווי הכתומה אינה נדלקת ונורת החיווי הירוקה תקינה, יש לפנות למרכז שירות.

