



## תוכן עיניינים

77	אודות TriPollar® STOP™
77	הוראות בטיחות
76	תכולת הערכה
75	הליך הטיפול
73	איתור תקלות
73	מפרט טכני
73	מרכז שירות

# עברית

חובה לקרוא מדריך זה בעיון לפני השימוש במכשיר.  
מידע נוסף ניתן למצוא ב: [www.stop-age.com](http://www.stop-age.com)

I4690001 / rev 2 / Feb 2012



הוראות בטיחות	אודות TriPollar® STOP™
---------------	------------------------


- ⚠ אזהרה:** זהו מכשיר חשמלי! על מנת להפחית את הסיכון מקבלת שוק חשמלי קטלני:
- אין לנעת במכשיר במידה ונפל למים. יש להציא מהתקע בדיים יבשות.
  - אין לאוחסן את המכשיר ליד מקור מים כגון כיר או אמבטיה
  - פד לאור סיום השימוש או לפני ניקוי המכשיר יש לכבות את המכשיר ולהתק את ספק הכוח מן החשמל.
- ⚠ אזהרה:**
- חשוב - אין להשתמש במכשיר באיזורים הבאים: עפעפים, שפתיים, אוזניים, חזה ואיברי מין.
  - יש להשתמש במכשיר אך ורק לפי יעוד המקורי ועל פי הוראות השימוש המפורטות ב"מדריך למשתמש".
  - כאשר המכשיר מוצב לשימוש דולק, אין להשאיר ללא השגחה ואף לנעת באלקטרוחית.
  - אין להשתמש במכשיר אם הוא מופקד.
  - אין להשתמש במכשיר אם הרכב החשמלי קרוע.
  - יש להשתמש במכשיר אך ורק בצירוף הבלב והספסוק המקוריים.
  - גיל ההכנה לטיפול TriPollar® After Treatment Preparation Gel ST0P™ וקודם לאחר טיפול.
  - יש להרוחק את המכשיר מהשטח ידם של ילדים.
  - אין לנעת במכשיר אלא בדיים יבשות לחלוטין.
  - יש למרוח את ג'ל ההכנה לטיפול TriPollar® preparation gel ST0P™ על פי הוראות השימוש המפורטות ב"מדריך למשתמש".
- שימוש במכשיר שלא על פי הוראות ההפעלה המפורטות במדריך זה עלול לגרום נזק לערכם, סלל כוחות.

TriPollar® STOP™ הינו מכשיר בטוח, אפקטיבי וקל לשימוש, המביא אליכם הביתה תוצאות איכותיות ומקצועיות, בדומה למושב במרפאות המקצועיות. TriPollar® STOP המעניק לכם תוצאות מיידיות וארוכות טווח, מבוסס על TriPollar® – טכנולוגיית RF פורצת דרך.

מכשיר ה-TriPollar® STOP™ מעניק בעזרת 4 אלקטרודות, אנרגיה חשמלית ממוקדת בתדר גבוה לשכבת הרדמיס, המחממת את שכבת העור מבפנים הרחום מאץ סביב טבעי את פעולת הרדמיס, מסוך את סביב הקולגן הקיימים ומגביר צירת סביב קולגן חדשים - הם התומכים בשכבת העור העליונה ואחראים למראה צעיר ורענן של עורנו. כאשר סביב הקולגן מתרכבים ומתחזקים, העור חוזר יותר, מוצק יותר, מרוקן וגמיש יותר.

מקובל מדיין אחרי הוראות שימוש של TriPollar® STOP™ יעבור את סימני הזמן על פניכם. מתיאם לכל סוג צבעי עור.


למידע נוסף על טכנולוגיית TriPollar® בקוה באתר שלנו: [www.stop-age.com](http://www.stop-age.com)

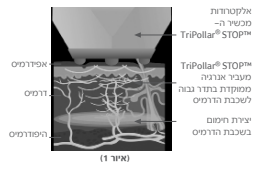



**תכולת הערכה** | **הוראות בטיחות**

- לפני השימוש, נא בדקו כי כל הפריטים הבאים כלולים בערכה:
- 1 מכשיר TriPollar® STOP (שרטוט 1)
  - 2 ספק כוח TriPollar® STOP (שרטוט 2)
  - 3 מתאם שקע TriPollar® STOP (שרטוט 3)
  - 4 ג'ל ההנה TriPollar® STOP Preparation Gel (שרטוט 4)
  - 5 קרם לאחר טיפול TriPollar® STOP After Treatment (שרטוט 5)
  - 6 מדריך למשתמש TriPollar® STOP (שרטוט 6)
  - 7 תעודת אחריות TriPollar® STOP (שרטוט 6)

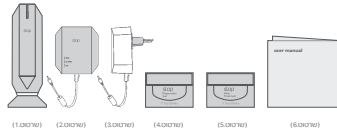

**בנייה, ואחד או מספר פריטים לא נמצאים בערכה, צרו קשר עם מרכז השירות שלנו.**

- אין להשתמש ב-TriPollar® STOP במידה ואחד או יותר מהסעיפים הבאים תקף לגביכם:
- באם הנכם מתחת לגיל 18
  - באם הינכם בעלי קוצב לב או דפיקרילטור.
  - באם קיימים שטחי מותב באיזור הטיפול (במקרה של שחלים דנטאלים ניתן להשתמש במכשיר בנפרד).
  - באם הינכם בעלי היסטוריה של סרטן – במיוחד סרטן העור או מלנמה.
  - באם הנכם בעלי בעיה רפואית חמורה כגון אי סדירות בתפקוד הלב.
  - באם הנכם הריון או מנקות.
  - באם הנכם חולים במחלות אוטואימוניות כגון איידס, או נטלים תרופות לדיכוי המערכת החיסונית.
  - באם הנכם חולים במחלות חום כלשהם כגון הרפס סימפלקס (באיזור הטיפול).
  - באם הנכם סוללים ממהלך עור באיזור הטיפול, כגון פצעים, דלקות, פטריאזיס, אקזמות, ספיריות ליתרון וכו'.
  - באם הנכם בעלי היסטוריה של עור מוצקן או עור רגיש במיוחד.
  - באם עברתם ניתוח או טיפול לזר או קולף כימי באיזור הטיפול בשלושת החודשים האחרונים (או הנכם עדין בשלבי החלמה מטיפול שכזה).
  - באם יש לכם חומר מילוי קבועים באיזור הטיפול.
  - באם יש לכם מילוי זמני באיזור הטיפול, אלא התייעצו עם הרופא שלכם לפני השימוש במכשיר.
  - באם הינכם נטלים תרופות סטרוידיות או המאפסיות או תוספי תזונה או ויטמינים או כל חומר אחר העלול לגרום לעור רגיש או יבש.
- להשתמש לבכם, בכל מקרה של חוסר וודאות או התלבטות לגבי רגישות כאלו ואחרות, מומלץ להועץ עם הרופא לפני השימוש ב-TriPollar® STOP.



**הליך הטיפול**

- טיפול**
1. חלצו על כפתור ההפעלה (ON) של מכשיר ה-TriPollar® STOP.
  2. וודאו כי העורה היחידה נדלקה.
  3. תדלקו את פניכם לאזור עם פגמים כגון, שחל 4 האלקטרודות יגיעו בעורכם במהלך כל הטיפול.
  4. היעו את המכשיר באיטיות רבה מאוד, בצורה מעגלית, בכדי לחמם את איזור הטיפול עד לטמפרטורה האופטימלית.
  5. כאשר העור יגיע לטמפרטורה האופטימלית, העורה הבתומה תדלק, המשיכו עוד מספר שניות ועברו לאיזור הטיפול הבא.
  6. חזרו על פעולה זו בכל אחד מאיזורי הטיפול עד לחימום כל האזורים הנבחרים.
  7. כעת נחמם פעם שניה. העבירו את המכשיר על פני כל שטח הטיפול, בתנועות איטיות, נדולות ועגולות.
  8. אין צורך לחכות שהעורה הכתומה תדלק. הטיפול חושלים לאורך סיום שלב זה.
  9. ניתן להבדיר את עיילת הטיפול על ידי העברת המכשיר בתנועות "לפטינג" – מנסיס הבטור לכיוון הליחים, לאחר הטיפול.
  10. בב אחר המכשיר.
  11. קחו יבשו את עורכם משאירות הג'ל.
  12. מרחו את קרם הטיפול TriPollar® STOP After Treatment על כל איזור הטיפול.
  13. קחו את מכשיר ה-TriPollar® STOP במבגון לח או בגיי טישו עדין, וסגרו את המכסה. חל איסור על הרטבת המכשיר במים!



- סקירת מכשיר TriPollar® STOP**
- נורת החיו הרוקה (אזור 6)  
הנורה הירוקה דולקת כאשר המכשיר בפעולה (ON)  
נורת החיו הכתומה (אזור 6)  
הנורה הכתומה דולקת, כשאזור הטיפול נמצא לטמפרטורה האופטימלית.
- מנגנון בטיחות**
- מנגנון הבטיחות מנע על עורכם מחימום יתר. ברגע שעורכם היעו למפוטרת הטיפול המקסימלית, נורת החיו הרוקה התברב לסימון (בשלב זה נורת החיו הכתומה דולקת). נורה מורכבת לסימון מסמנת שפגנת הבטיחות נכנס לפעולה ושהמכשיר מפסיק אוטומטית את פעולת החימום. מעבר לאיזור טיפול חדש שטרם חומם, יפעיל את המכשיר מחדש – אוטומטית.
- משך הטיפול**
1. טיפול פנים מלא אורך בממוצע 20 דקות. ניתן לקצר את אורך הטיפול אם בוחרים לטיפול באזורים נקודתיים בלבד. אורך הטיפול הינו אישי ויכול להשתנות ממספרים אחד לשני.
  2. להוצאת מקסימלית השתמשו במכשיר 2-3 פעמים בשבוע למשך 6-8 שבועות.
  3. יש להקפיד על הפסקה של יום אחד לפחות בין טיפול לטיפול, באותו איזור טיפול.
  4. למשיחה על התוצאות לאחר סיום הליך מלא של טיפולים, יש להמשיך ולהשתמש במכשיר 2-4 פעמים בחודש או במידת הצורך.





#### טיפים

- גל ההגנה Preparation Gel STOP™ קודם הטיפול STOP™ After Treatment תפקידם לשמש עד 12 חודשים מרגע פתיחת המיכל.
- חשוב – יש לבצע בדיקת רגישות 24 שעות לפני הטיפול הראשון. מרחו כמות קטנה של גל ההגנה Preparation Gel STOP™ במקום נסתר כגון בחלק הפנימי של הזרוע, ונסו עם המכשיר. יש לבצע בדיקת רגישות על שטח קטן עם קודם הטיפול STOP™ After Treatment.
- על כל 4 האלקטרודות לנעת בעור בו זמנית, במהלך כל זמן הטיפול.
- השארת המכשיר על אותו האזור ללא תנועה עלול ליצור כושה חיצונית. תנועות בלתי נפסקות חיצונית לבטיחותכם ולהצלחת הטיפול.
- נורת החשי הכתומה
- אם הנורה הכתומה אינה נדלקת לאחר 5 דקות של חימום אזור טיפול, או אם אינכם מרגישים חום, נסו להאט כמה שיותר את מנועת הסכיב בלי לעצור על כפי העור.
- אם הנורה הכתומה נדלקת מיד, הורידו את העוצמה בספק הכוח.
- אם נורת החשי הכתומה אינה נדלקת לאחר 3-5 דקות, בחרו בעוצמה חזקה יותר בספק הכוח.
- סיבובים איטיים המכסים אזור ממוקד, אפקטיביים יותר מסיבובים גדולים ומרבים. למעשה כל שסיבוב המכשיר איטי יותר, כך יתחמם האזור מהר יותר.

#### מדדים לטיפול מוצלח

כאנציה מיעולת הטיפול, עורכם עלול להאדים מעט ואף לתפוח מעט. תופעות אלו יעלמו זמן קצר לאחר הטיפול והן אלו המעידות על תחילתו של תהליך השינוי החל בשכבות הפנימיות של העור. תופעות אלו ייעלמו לאחר זמן מה.

#### תופעות לואי אפשריות

תופעות הלואי רובאית הן נדירות. במידה והן מופיעות הן בדרך זמנית ונגעלות לאורך זמן מה. אולם, במידה ותופעות לוי אלו נמשכות למעלה מ-24 שעות, יש לפנות לרופא.

- כאבים ממושכים באזור המטופל
- נזק לרקמות העור (עקמומיות, קרום או כוויה)
- עור רגיש למגע
- חבורות
- כאב ראש קל



### איתור תקלות

#### איתור תקלות

- במידה ומכשיר TriPollar® STOP™ אינו פועל, נא בדיקו את אחת מהאפשרויות הבאות – לפני פניה למרכז שירות:
1. וודאו כי הכרטיס את מכסה הבטיחות מהמכשיר.
  2. וודאו כי כבל החשמל מחובר למכשיר.
  3. וודאו כי כנפתר התפילה לחוץ וכי האור הירוק דולק.
  4. וודאו כי מרחתם את גל ההגנה preparation gel STOP™ כראוי. ללא מרחת גל המכשיר לא יעבוד כראוי.

### מפרט טכני

מפרט טכני  
משקל: 85 גרם  
מידות: גובה - 134 מ"מ אורך - 51 מ"מ חוב - 32 מ"מ  
תנאי הפעלה: סמפרטורה:  
לחות יחסית: 20%-80%  
AC 100Vac to 240Vac 0.6 A 50/60Hz  
DC 7V/8V/9V 1.5A  
הובלה ואחסון: טמפרטורה 0°C - 40°C  
לחות יחסית: 10%-90%  
בטיחות חשמל: ספק החשמל מסוג בדגד 2 - בידוד כפול

### מרכז שירות

נא וודאו כי יש לפנים את המספר הסיידור של המכשיר המודפס בצד המכשיר לקבלת פרטי מרכז התמיכה הקובץ לביחכם, נא בקרו באזור האינטרנט שלנו: [www.stop-age.com](http://www.stop-age.com)  
שביעות רצונכם חשובה לנו. נשמח לקבל מכם הערות והארות בכל נושא. ניתן לשלוח לנו דרך האתר [www.stop-age.com](http://www.stop-age.com) או אלי הכתובת הרשומה בגב מדריך זה.

